




Sterile engangslancetter


Til effektiv og behagelig udtagning af kapillærblod

Stort set smertefri

Den elektropolerede, trefacetterede, skrå nålespids garanterer en glat og skarp finish for at opnå optimale blodprøver med maksimal komfort. Desuden er mylife™ Lancets kun 30G i diameter.

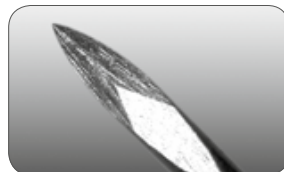


mylife™ Lancets
(150 × zoom)

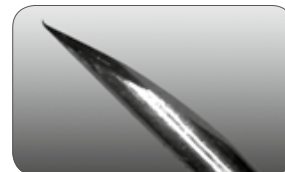


Konkurrenternes lancetter
(150 × zoom)

Eksponeret nålelængde


Nålen er perfekt positioneret til at sikre ensartet nålekoncentricitet og eksponeret nålelængde.

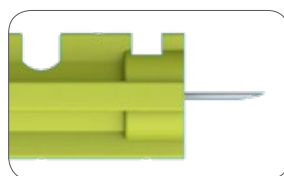


Håndtering af mylife™ Softlance

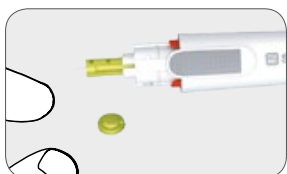

1. mylife™ Softlance-lancetenhed og mylife™ Lancets efter brug.

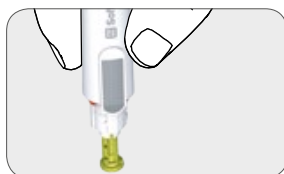


2. For at forhindre punktorsår kan lancetten nemt trykkes ind i hættten.

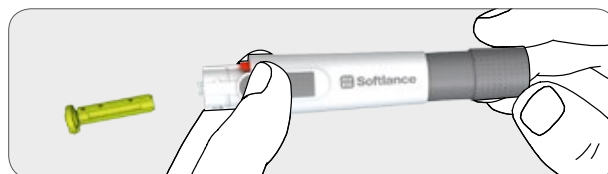


3. Hygiejnisk og sikker udtrækning af lancetten uden at berøre den. Den brugte lancet anbringes i en kanyleboks eller en beholder til biologisk farligt affald.




Håndtering af mylife™ AutoLance™

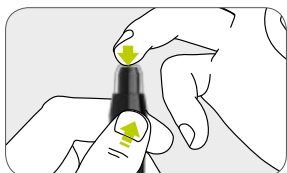

1. mylife™ AutoLance™ med en automatisk lade- og udløserfunktion.

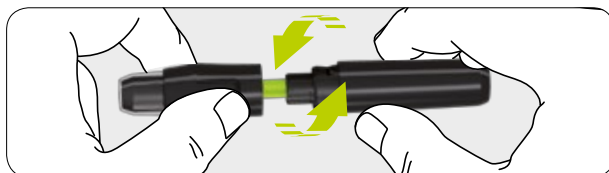

2. Praktisk bajonetlås og stopfunktion, så lancetten nemt kan udskiftes.

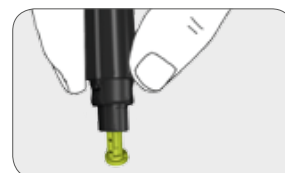

3. For at forhindre punktorsår kan lancetten nemt trykkes ind i hættten. Sikker bortskaffelse efter brug.



mylife™ Lancets – et kvalitetsprodukt



Egnet til børn og voksne

mylife™ Lancets standard

Lancetter af høj kvalitet til hverdagsbrug for at sikre optimalt blodudløb. Designet til at gøre blodprøvetagning lettere og mere behagelig.

mylife™ Lancets multicolor

Samme funktion som mylife™ Lancets, standard, men kan fås i syv forskellige farver.

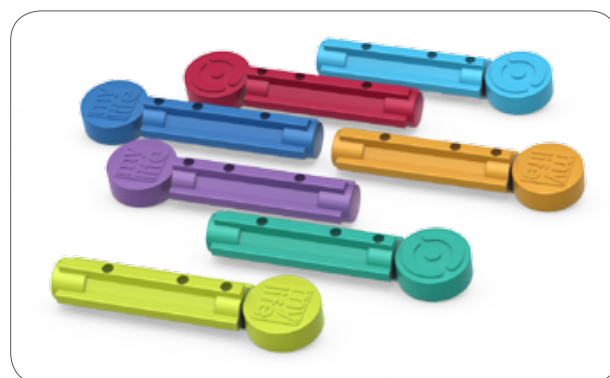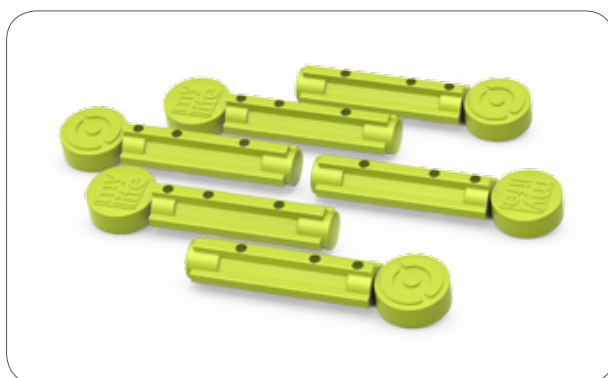

Bevarer steriliteten i 5 år

Sterilisationsdosis fastsat i overensstemmelse med ISO 11137-2:2012

Ref. nr.	Antal	Beskrivelse	Mål	Nålediameter	Spidslængde	Udvendig diameter
7101030	200 stk.	mylife™ Lancets standard	30G	0,30 ± 0,01 mm	3,3 ± 0,3 mm	6,3 ± 0,5 mm
7101031	200 stk.	mylife™ Lancets multicolor	30G	0,30 ± 0,01 mm	3,3 ± 0,3 mm	6,3 ± 0,5 mm