



Steriele wegwerplancetten

voor een effectieve en comfortabele monsternamming van capillair bloed

Vrijwel pijnloos

De elektrisch gepolijste, drievoudig afgeschuinde naaldpunt geeft een gladde en scherpe afwerking, voor het nemen van optimale bloedmonsters, met een maximum aan comfort. De mylife™ Lancets hebben bovendien een diameter van slechts 30G.




mylife™ Lancets
(150 × zoom)




Lancetten
van concurrenten
(150 × zoom)

Blootgestelde naaldlengte


De naald is perfect gepositioneerd voor een consistente naaldconcentriciteit en blootgestelde naaldlengte.

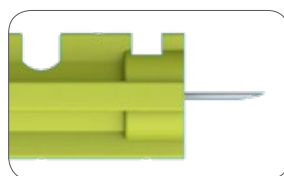


Ontworpen voor de mylife™ Softlance

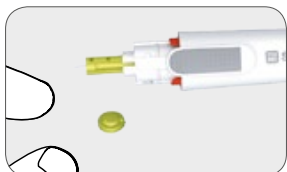

1. mylife™ Softlance-prikpen en mylife™ Lancet na gebruik.

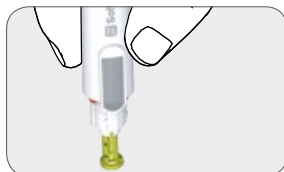


2. Om prikwonden te voorkomen, kan de lancet gemakkelijk door de dop worden geprikt.

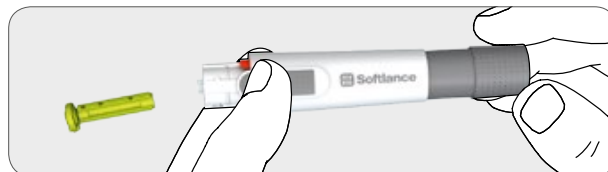


3. Eenvoudig en hygiënisch uitwerpen van de lancet, zonder hem te hoeven aanraken. Doe de gebruikte lancet in een geschikte naaldencontainer.




Ontworpen voor de mylife™ AutoLance™

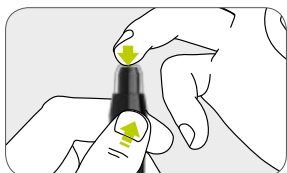

1. mylife™ AutoLance™ – met een automatische laaden ontgrendelingsfunctie.

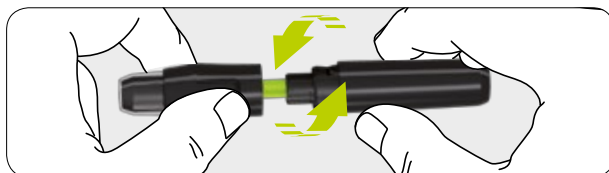

2. Praktische bajonetsluiting en stopfunctie voor gemakkelijk vervangen van de lancet.

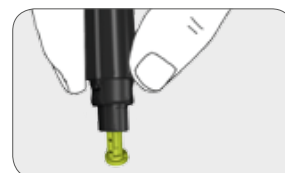


3. Om prikwonden te voorkomen, kan de lancet gemakkelijk door de dop worden geprikt. Veilig weggoeien na gebruik.



De reeks hogekwaliteitslancetten van mylife™ geschikt voor volwassenen en kinderen

mylife™ Lancets standard

Hoge kwaliteits lancetten voor dagelijks gebruik, voor een optimale bloedstroom. Zo ontworpen dat ze het nemen van bloedmonsters gemakkelijker en comfortabeler maken.

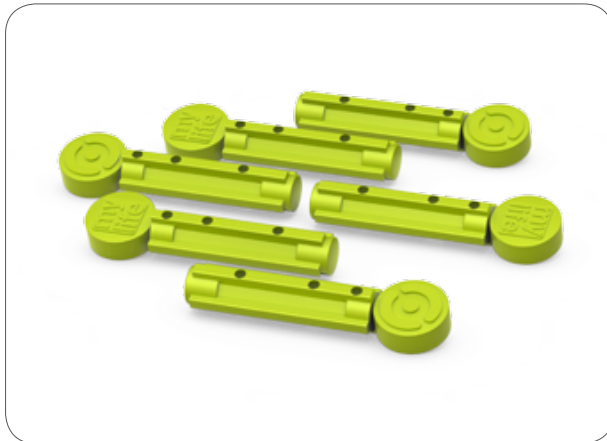

Blijft 5 jaar steriel

De sterilisatiedosis is bepaald in overeenstemming met ISO 11137-2:2012

Ref. nr.	Aantal	Beschrijving	Naalddikte	Naalddiameter	Puntlengte	Buitendiameter naaldlichaam
7101030	200 stuks	mylife™ Lancets standard	30G	0,30 ± 0,01mm	3,3 ± 0,3mm	6,3 ± 0,5mm