



## mylife™ SafetyLancets

Kapillaariveren näytteenotto turvallisesti ja helposti

Innovatiivinen patentoitu muotoilu tekee kapillaariverinäytteen ottamisesta turvallista ja helppoa. Kertavapautustoiminto ja tiivis suojus takaavat turvallisuuden sekä suojaavat potilaita ja terveydenhuollon ammattilaisia ristikontaminaatiolta ja vammoilta. mylife™ SafetyLancets -lansettia on saatavana kahta eri pistosyvyyttä: mylife™ SafetyLancets (28G/1,5 mm) ja mylife™ SafetyLancets Comfort (30G/1,2 mm).

### Turvallisuusominaisuudet

- Turvasinetti ilmaisee visuaalisesti, onko mylife™ SafetyLancet -lansettia käytetty aiemmin
- Suojus ylläpitää steriiliyden ja estää kontaminaation ennen käyttöä
- Uudelleenkäyttö ei mahdollista kertavapautustoiminnon ansiosta



mylife™ SafetyLancets  
(28G/1,5 mm)


### Miellyttävät ominaisuudet

- Ylivertaisen laadukas neula (kolmiviisteinen neulan kärki) tukee optimaalista verenvirtausta ja erinomaista käyttömukavuutta
- Ei vaadi esilatausta tai -asennusta ennen käyttöä




mylife™ SafetyLancets Comfort  
(30G/1,2 mm)


### mylife™ SafetyLancet -lansetin käyttö

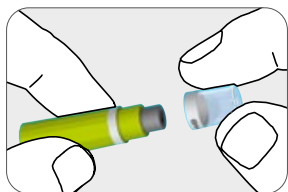


**1** Käännä suojusta ja irrota se mylife™ SafetyLancet -lansetista.

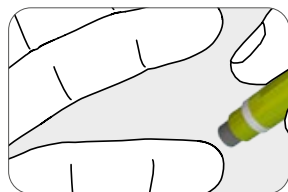

**2** Aseta mylife™ SafetyLancet sormen päälle.

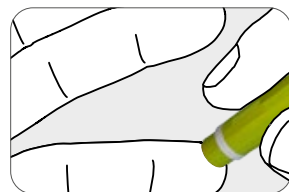

**3** Aktivoi lansetin mekanismi painamalla koholla olevaa tasoa valittua paikkaa vasten.

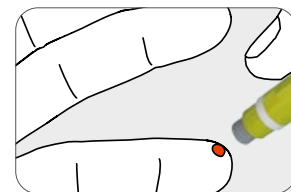

**4** Neula vetäytyy sisään heti käytön jälkeen. Kertavapautustoimintonsa ansiosta mylife™ SafetyLancet -lansettia ei voida käyttää uudelleen.



## mylife™ SafetyLancets

Steriilit kertakäyttöiset turvalansetit tekevät verinäytteen ottamisesta turvallisen ja mahdollisimman miellyttävän

Saatavana 100 ja 200 kpl laatikoissa, joissa on kätevä liukukansi



mylife™ SafetyLancets (28G/1,5 mm)



mylife™ SafetyLancets Comfort (30G/1,2 mm)

### Verensokerin seurantaan ja muihin diagnostisiin testeihin:

- Diabetesklinikoilla
- Sairaaloissa
- Kotisairaanhoidossa

### Steriiliys säilyy 5 vuotta

- Steriloitu säteilyttämällä
- Sterilointiannos määritetty ISO 11137 -standardin mukaan

Gauge	Neulan halkaisija	Pistosyvyys	Kuvaus	Lkm	Tuotenro
28G	0,36 mm	1,5 ± 0,2 mm	mylife™ SafetyLancets	100 kpl	<b>700009359</b>
28G	0,36 mm	1,5 ± 0,2 mm	mylife™ SafetyLancets	200 kpl	<b>7100031</b>
30G	0,30 mm	1,2 ± 0,2 mm	mylife™ SafetyLancets Comfort	100 kpl	<b>700009361</b>
30G	0,30 mm	1,2 ± 0,2 mm	mylife™ SafetyLancets Comfort	200 kpl	<b>700001495</b>