



## mylife™ SafetyLancets

Kapillär blodprovtagning med minskad risk för oavsiktliga stickskador

Den innovativa patenterade utformningen gör det lätt och säkert att ta kapillärblodprover. Frisläppningen i ett steg och ett slutet lock ger säkerhet och skyddar såväl patienter som vårdpersonal från smittöverföring och skador. mylife™ säkerhetslansetter finns i två olika versioner: mylife™ SafetyLancets (28G/1,5 mm) och mylife™ SafetyLancets Comfort (30G/1,2 mm).

### Säkerhetsfunktioner

- Säkerhetsförseglingen visar synligt om en mylife™ SafetyLancet har använts tidigare eller inte
- Skyddslocket bevarar steriliteten och skyddar från kontaminering före användning
- Oanvändbar efter användning tack vare en frisläppningsfunktion i ett steg



mylife™ SafetyLancets  
(28G/1,5 mm)


### Komfortfunktioner

- Överlägsen nålqualität (trippelfasetterad spets) garanterar ett optimalt blodflöde med maximal komfort
- Ingen förladdning eller hopsättning före användning krävs




mylife™ SafetyLancets Comfort  
(30G/1,2 mm)


### Så här använder du mylife™ SafetyLancet

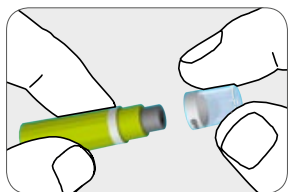


**1** Vrid och ta bort det skyddande locket på en mylife™ SafetyLancet.

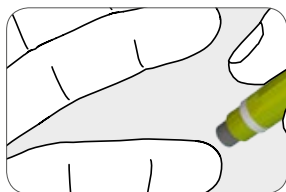

**2** Sätt mylife™ SafetyLancet mot fingret.

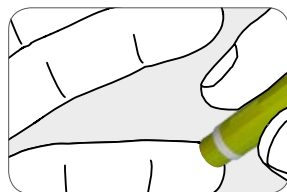

**3** Tryck den upphöjda delen stadigt mot det valda stället för att aktivera stickmekanismen.

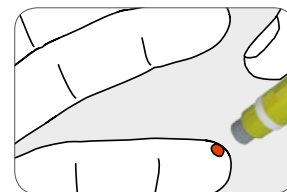

**4** Nålen dras tillbaka omedelbart efter användningen. Tack vare frisläppning i ett steg kan mylife™ säkerhetslansetter inte återanvändas av misstag.



## mylife™ SafetyLancets

Sterila säkerhetslansetter för engångsbruk för säker och bekväm rutinmässig medicinsk provtagning

Finns i askar om 100 och 200 styck med praktiskt skjutlock



mylife™ SafetyLancets (28G/1,5 mm)



mylife™ SafetyLancets Comfort (30G/1,2 mm)

### För användning vid mätning av blodglukos och andra diagnostiska tester

- på diabetesmottagningar
- på sjukhus
- vid vård i hemmet

### Håller steriliteten i 5 år

- Steriliseringsdosen bestämd enligt ISO 11137
- Gamma-steriliserad (Kobolt-60-strålning)

Gauge	Nåldiameter	Insticksdjup	Beskrivning	Antal	Best.nr
28G	0,36 mm	1,5 ± 0,2 mm	mylife™ SafetyLancets	100 st.	<b>700009359</b>
28G	0,36 mm	1,5 ± 0,2 mm	mylife™ SafetyLancets	200 st.	<b>7100031</b>
30G	0,30 mm	1,2 ± 0,2 mm	mylife™ SafetyLancets Comfort	100 st.	<b>700009361</b>
30G	0,30 mm	1,2 ± 0,2 mm	mylife™ SafetyLancets Comfort	200 st.	<b>700001495</b>