



Clickfine®
AutoProtect™

Enjoy prevention.



swissmade 

mylife™ Clickfine® AutoProtect™ – nålen, der kun stikker, når den skal.

- Innovativ låsemekanisme til beskyttelse mod stikskader
- Overholder kravene i direktiv 2010/32/EU, §4, art. 7¹
- Kanylen er skjult af en blå sikkerhedskappe for større sikkerhed
- Særlig silikoneoverfladebehandling giver øget injektionskomfort
- Kompatibel med alle større mærker², inden for injektionspenne og kan fås i længderne 5 mm og 8 mm

AUTO  PROTECT



More freedom. More confidence. With mylife™.

YPSOMED
SELF-CARE SOLUTIONS



Din sikkerhed er vigtig for os

Takket være sit innovative og patenterede låsesystem reducerer mylife™ Clickfine® AutoProtect™ risikoen for stikskader, hvorved den opfylder kravene i direktiv 2010/32/EU, §4, art. 7¹. mylife™ Clickfine® AutoProtect™ sikkerhedspennålen garanterer følgende karakteristika:

- Indeholder nål med fuldt integreret sikkerhedsmekanisme
- Låser automatisk umiddelbart efter injektion
- Rød låseindikator vises tydeligt
- Synlig kanylespids gør indstikket lettere
- Låsen dækker nålen permanent og forhindrer gentagen brug



2010/32/EU §4, art. 7 ✓

Støtter opfyldelsen af punkt 4, artikel 7 i Rådets direktiv 2010/32/EU af 10. maj 2010 – Forebyggelse af stikskader i sygehus – og sundhedssektoren

Tildelt i 2009 af
Chicago Athenæum:
Museum of Architecture
and Design




Førsteklasses kvalitetsfunktioner

Oplev høj komfort



Easy Glide

Silikonebehandlet overflade giver en jævn injektion og øget komfort.

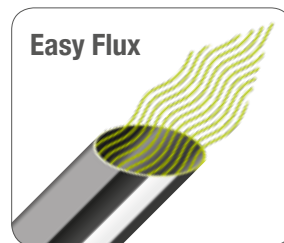

Easy Flux

Medicinsk kanyle i topkvalitet med tyndvægget teknologi gør medicinering nem og optimal på grund af større, indvendig diameter.



Hvordan det fungerer

Pålidelig sikkerhed og enkelhed



mylife™ Clickfine® AutoProtect™ med beskyttelseshætte




Før injektion: kanyle beskyttet af beskyttelseskappe




Under injektion: beskyttelseskappe udløser nålen




Efter injektion: automatisk lås og rød låseindikator

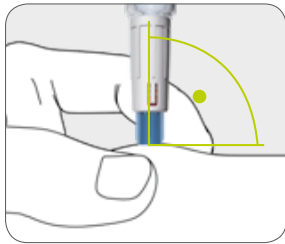


Indfør injektionspennen i en vinkel på 90° på det ønskede injektionssted, og hold den lodret.

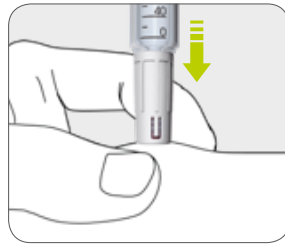

Tryk let på injektionspennen, indtil den blå beskyttelseskappe ikke længere er synlig.

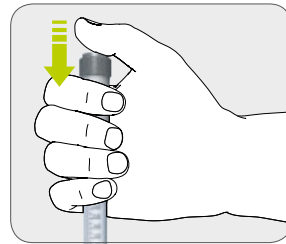

Tryk nu på doseringsknappen og administrér injektionen langsomt. Hold derefter nålen stille i fedtvævet, mens du tæller til 10.

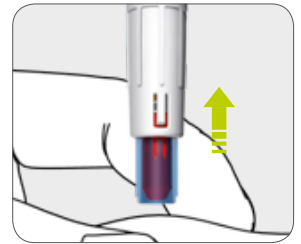

Fjern injektionspennen. Den blå beskyttelseskappe låser automatisk, og den røde låseindikator bliver synlig.



Konsultér brugsanvisningen



Den ideelle længde til enhver patient

Farvekoder for simpel identifikation af forskellige nålelængder

mylife™ Clickfine® AutoProtect™ pennålen kan fås i to forskellige længder: 5 mm og 8 mm.

5 mm nålen kan anvendes uden en hudfoldeteknik, hvilket minimerer risikoen for stikskader på sundhedspersonale under injektionen.³



5 mm, 31G / 0,25 mm



8 mm, 29G / 0,33 mm



Universal click®

mylife™ Clickfine® AutoProtect™ til alle større mærker inden for injektionspenn

mylife™ Clickfine® AutoProtect™ pennålene er testet i henhold til ISO 11608-2 og er fuldt funktionsdygtige og yder bedre sikkerhed, når de anvendes sammen med de injektionspenn, der er anført på mylife™ Clickfine® AutoProtect™ æsken med pennåle. I tvivlstilfælde, bedes du henvende dig til producenten. Følg vejledningen til din injektionspen, før du anvender en mylife™ Clickfine® AutoProtect™ pennål.



¹ Rådets direktiv 2010/32/EU – Forebyggelse af stikskader i sygehus- og sundhedssektoren.

² Se listen over kompatible penn på mylife™ Clickfine® AutoProtect™ pennålens æske eller på hjemmesides www.mylife-diabetescare.com.

³ K. Strauss and WISE Consensus Group: WISE recommendations to ensure the safety of injections in diabetes. Diabetes & Metabolism. 2012, 38, S2–S8, Supplement 1.



Diabetescare

More **freedom.**
More **confidence.**
With **mylife™.**



Infusionssystemer



Blodsuktermåling



Behandlingsstyring



Penkanyler

Med mærket mylife™ Diabetescare tilbyder Ypsomed et omfattende sortiment af produkter og tilbud til personer med diabetes. Det giver brugerne mulighed for en diskret og sikker selvbehandling. Med mylife™ Diabetescare bliver selvbehandlingen en selvfølge.

Ypsomed ApS // Smedeland 7 // 2600 Glostrup //
info@ypsomed.dk // www.mylife-diabetescare.dk // +45 48 24 00 45

700017674/10193979-DK-diaV01