




Lancette sterili monouso


per permettere un prelievo di campioni di sangue efficace e confortevole

Virtualmente indolori

La punta dell'ago con lucidatura elettronica e tripla smussatura garantisce una finitura liscia e affilata per ottenere campioni di sangue ottimali con il massimo comfort. Inoltre, il diametro delle mylife™ Lancets è di soli 30G.

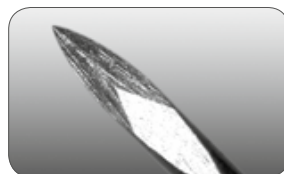


mylife™ Lancets
(zoom 150 x)

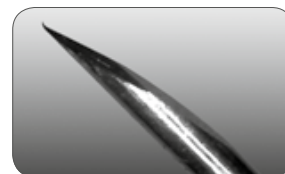


Lancette dalla concorrenza
(zoom 150 x)

Lunghezza esposta dell'ago


L'ago è perfettamente posizionato per garantire una costante concentricità e lunghezza esposta dell'ago.

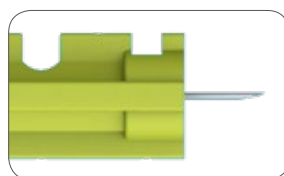


Progettate per l'uso con mylife™ Softlance

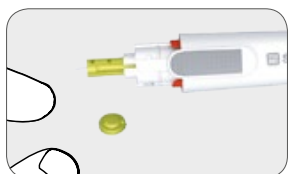

1. Dispositivo pungidito mylife™ Softlance e mylife™ Lancet dopo l'uso.

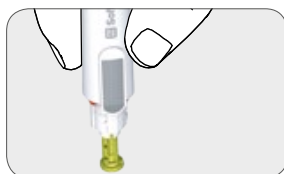


2. Per prevenire ferite da puntura, la lancetta può essere facilmente inserita nel cappuccio.

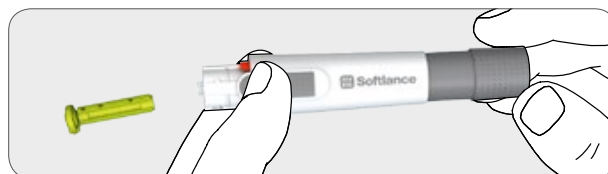


3. Espulsione igienica e sicura della lancetta senza toccarla. Smaltire la lancetta usata in un adeguato contenitore per rifiuti taglienti e pungenti o per rifiuti a rischio biologico.




Progettate per l'uso con mylife™ AutoLance™

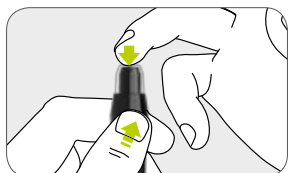

1. mylife™ AutoLance™ con funzione automatica di caricamento e rilascio.

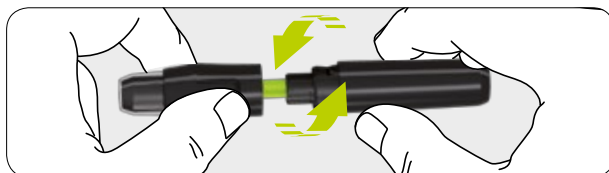

2. Pratico blocco a baionetta e funzione di arresto per una facile sostituzione della lancetta.

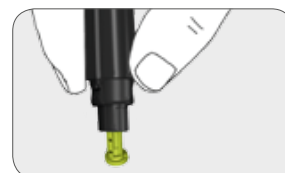

3. Per prevenire ferite da puntura, la lancetta può essere facilmente inserita nel cappuccio. Smaltimento sicuro dopo l'uso.




mylife™ Lancets, una gamma di prodotti di elevata qualità

Ideali per adulti e bambini

mylife™ Lancets standard

Lancette di elevata qualità per uso quotidiano per garantire un flusso ottimale del sangue. Progettate per rendere più agevole e confortevole il prelievo di sangue.

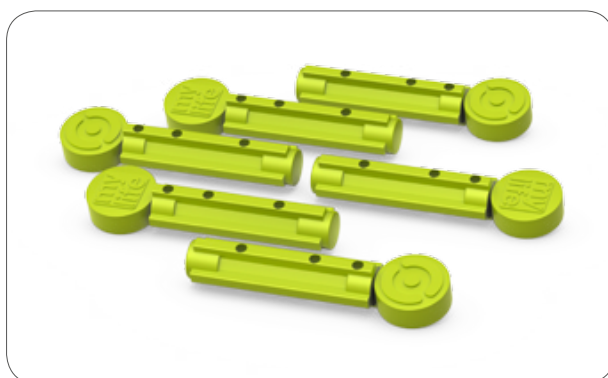

mylife™ Lancets multicolor

Funzione analoga a quella di Lancets standard, ma disponibili in sette colori diversi.



Rimangono sterili per 5 anni

Dose di sterilizzazione a norma ISO 11137-2:2012

Rif. n°	Qta.	Descrizione	Misura	Diametro ago	Lunghezza punta	Diametro esterno corpo
7101030	200pz.	mylife™ Lancets standard	30G	0.30 ± 0.01mm	3.3 ± 0.3mm	6.3 ± 0.5 mm
7101031	200pz.	mylife™ Lancets multicolor	30G	0.30 ± 0.01mm	3.3 ± 0.3mm	6.3 ± 0.5 mm