




Steriilit kertakäyttölansetit


Tekevät verinäytteen ottamisesta tehokkaan ja mahdollisimman miellyttävän

Lähes kivuton

Elektrolyysikiillotettu kolmiviisteinen neulan kärki takaa hellävaraisen ja terävän verinäytteenoton. Lisäksi mylife™ Lancets -lansettien halkaisija on ainoastaan 30G.

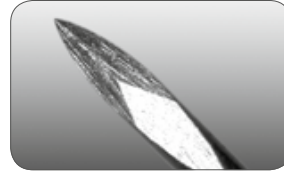


mylife™ Lancets
(150 × zoom)

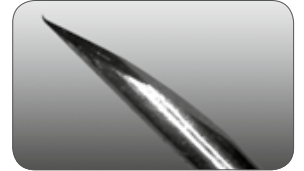


Muiden valmistajien lansetit
(150 × zoom)

Neulan näkyvän osan pituus


Neula asennoituu täydellisesti taaten yhdenmukaisen neulan samankeskeytyksen ja neulan näkyvän osuuden pituuden.

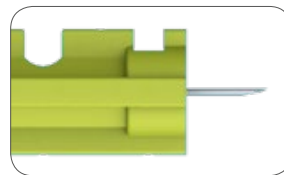


mylife™ Softlance -näytteenottolaitteen käsittelyvaiheet

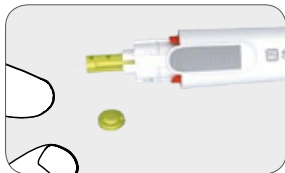

1. mylife™ Softlance -näytteenottolaite ja mylife™ Lancet käytön jälkeen.

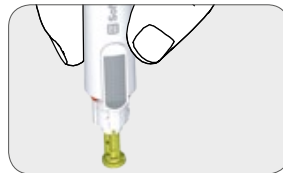

2. Lansetti voidaan helposti työntää suojaan, mikä estää neulanpistotapaturmat.

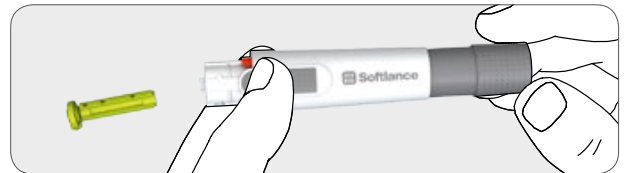


3. Helppo ja hygieeninen tapa poistaa lansetti ilman kosketusta. Laita käytetty lansetti asianmukaiseen teräville tai tartuntavaarallisille esineille tarkoitettuun säiliöön.




mylife™ AutoLance™ -näytteenottolaitteen käsittelyvaiheet



1. mylife™ AutoLance™ -automaattinen lataus- ja laukaisutoiminto.

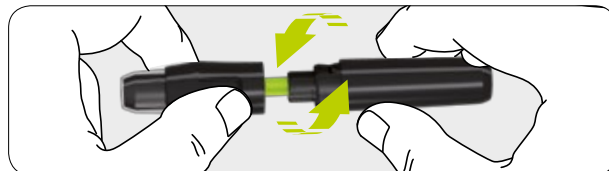

2. Käytännöllinen pistimen lukitus- ja pysäytystoiminto helpottaa lansetin vaihtoa.

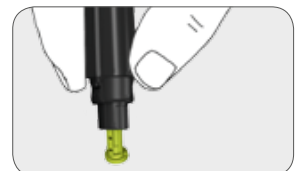

3. Lansetti voidaan helposti työntää suojaan, mikä estää neulanpistotapaturmat. Turvallinen hävittäminen käytön jälkeen.



mylife™ Lancets – korkealaatuinen tuotevalikoima



Sopii aikuisille ja lapsille

mylife™ Lancets standard

Jokapäiväiseen käyttöön tarkoitettut korkealaatuiset lanseetit takaavat optimaalisen verenvirtauksen. Helpompi ja miellyttävämpi verinäytteenotto.

mylife™ Lancets multicolor

Samat toiminnot kuin mylife™ Lancets standard -lanseeteissa, mutta saatavana seitsemänä eri värinä.

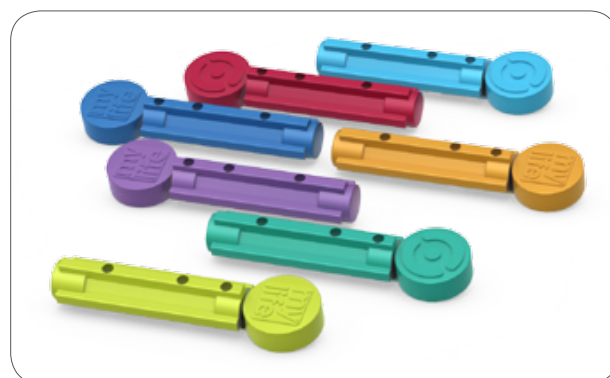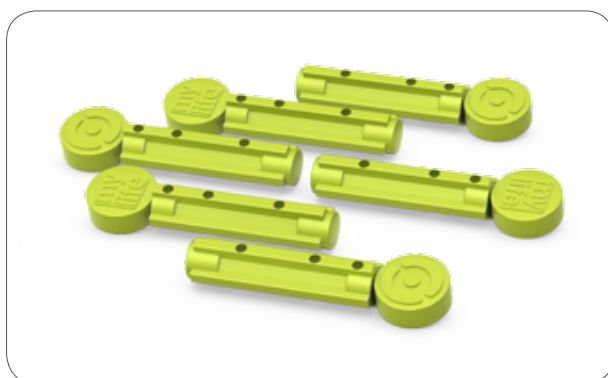

Steriiily saily 5 vuotta

Steriloiva annos määritetty standardin ISO 11137-2:2012 mukaan

Tuotenro	Lkm	Kuvaus	Gauge	Neulan halkaisija	Kärjen pituus	Rungon ulkohalkaisija
7101030	200 kpl	mylife™ Lancets standard	30G	0,30 ± 0,01 mm	3,3 ± 0,3 mm	6,3 ± 0,5 mm
7101031	200 kpl	mylife™ Lancets multicolor	30G	0,30 ± 0,01 mm	3,3 ± 0,3 mm	6,3 ± 0,5 mm