




Lancettes jetables stériles

permettant un prélèvement de sang capillaire efficace et confortable

Quasiment indolore

La pointe d'aiguille à triple biseau garantit, par polissage électrolytique, une finition nette et douce pour des prises de sang optimales et un confort maximum. En outre, le diamètre de mylife™ Lancets atteint 30G.

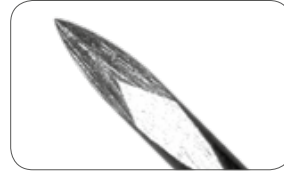


mylife™ Lancets
(agrandie 150 x)




Lancettes concurrentes
(agrandie 150 x)

Longueur d'aiguille utile


L'aiguille est parfaitement positionnée, garantissant une concentricité et une longueur d'aiguille utiles constantes.

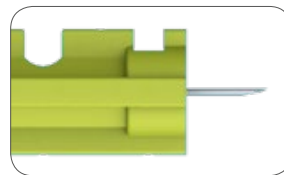


Procédure d'utilisation avec mylife™ Softlance

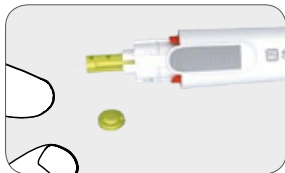

1. Autopiqueur mylife™ Softlance et mylife™ Lancet après utilisation.

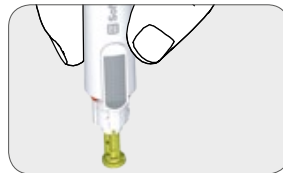

2. Pour prévenir toute blessure par piqûre, la lancette peut aisément être enfoncée dans son capuchon protecteur.

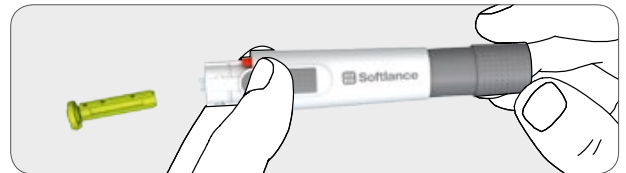


3. Ejection sûre et hygiénique de la lancette sans contact avec les mains. Éliminez la lancette usagée dans un récipient à l'épreuve des perforations ou dédié au matériel contaminé.




Procédure d'utilisation avec mylife™ AutoLance™



1. Autopiqueur mylife™ AutoLance™ avec fonction automatique de chargement et de déclenchement.

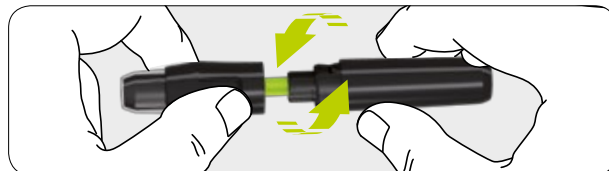

2. Verrouillage à baïonnette pratique et fonction d'arrêt pour un changement facile des lancettes.

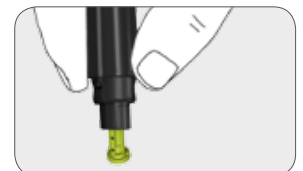

3. Pour prévenir toute blessure par piqûre, la lancette peut aisément être enfoncée dans son capuchon protecteur. Élimination en toute sécurité après utilisation.




mylife™ Lancets, une gamme de produits de grande qualité idéale pour les adultes et les enfants

Lancettes mylife™ standard

Des lancettes de haute qualité pour une utilisation quotidienne qui assurent un prélèvement sanguin optimal. Conçues pour rendre le prélèvement sanguin plus facile et plus confortable.

mylife™ Lancets multicolores

Même fonctionnement que les mylife™ Lancets standard, mais disponibles en sept couleurs différentes.

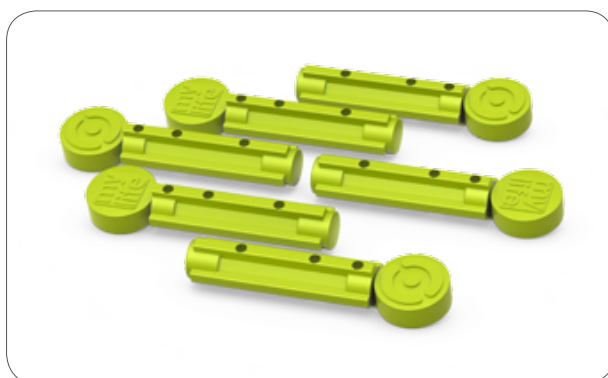

Stérilité préservée pendant 5 ans

Dose stérilisante déterminée selon la norme ISO 11137-2:2012

N° réf.	Qté.	Description	Calibre	Diamètre d'aiguille	Longueur de pt.	Diamètre ext. du corps
7101030	200 pcs	mylife™ Lancets standard	30G	0,30 ± 0,01mm	3,3 ± 0,3mm	6,3 ± 0,5mm
7101031	200 pcs	mylife™ Lancets multicolor	30G	0,30 ± 0,01mm	3,3 ± 0,3mm	6,3 ± 0,5mm

France

Ypsomed S.A.S // 18 – 20, rue soleillet // 75020 Paris //
info@ypsomed.fr // www.mylife-diabetescare.fr // Service Hotline: 0800 883058

Suisse

Ypsomed AG // Marché suisse // Brunmattstrasse 6 // 3401 Burgdorf //
info@ypsomed.ch // www.mylife-diabetescare.ch //
Numéro gratuit: 0800 44 11 44