



Penfine®  
Classic

# Enjoy reliability.



swissmade+

## mylife™ Penfine® Classic – kynäneula, johon voit luottaa

- Varma kiinnitys vain kahdella kierteellä
- Eriytynen ohutseinämäteknologia takaa optimaalisen lääkkeen virtauksen<sup>1</sup>
- Kynäneulojen eri pituudet erottuvat selkeällä värikoodilla
- Eriytynen silikonipintäkäsittely parantaa pistosmukavuutta
- Yhteensopiva kaikkien yleisimpien injektiokynien kanssa<sup>2</sup> saatavana 4 mm, 5 mm, 6 mm, ja 8 mm pituudet

Erityisen  
ohutseinämäisellä  
kanyylillä



More freedom. More confidence. With mylife™.


YPSOMED  
SELFCARE SOLUTIONS



## Erityisen ohutseinämäinen kanyyli

Parempi insuliinin virtaus

### Suurempi sisähalkaisija samalla ulkohalkaisijalla<sup>3</sup>

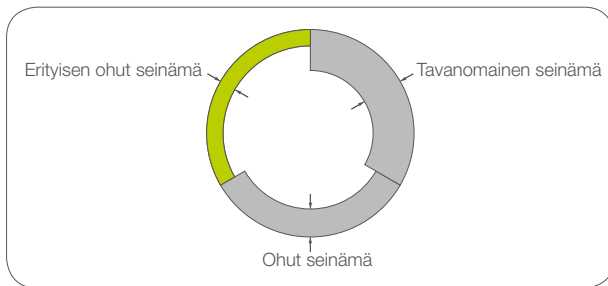


- Suurempi virtausnopeus tehostaa insuliinin annostelua<sup>1</sup>
- Kanyylin suuremman sisähalkaisijan ansiosta pistospainikkeen painamiseen tarvitaan vähemmän voimaa<sup>1</sup>
- Helpottaa vahvasti konsentroitujen insuliinien annostelua 200 U/mL alkaen




## Varma kiinnitys vain kahdella kierteellä


Intuitiivinen kynäneulan kiinnitystapa<sup>2</sup>

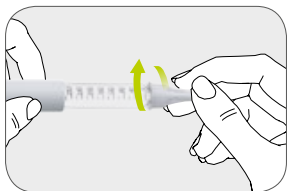

Kierrä kynäneula injektiokynään.

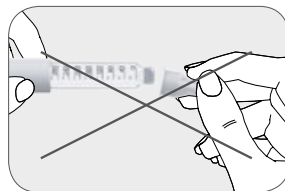

Varo taivuttamasta kynäneulaa kiertäessäsi sen kiinni injektiokynään.

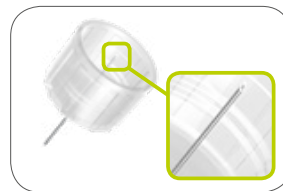

Nopea ja helppo kiinnitys kaksoiskierteen ansiosta.



Yleiskierteen ansiosta sopiva kaikkiin yleisimpiin injektiokynäin.<sup>2</sup>




## Ensiluokkaiset laatuominaisuudet

Koe luotettavaa mukavuutta



Pitkälle kehitetty, korkealaatuinen lääketieteellinen kanyyli: 4 mm:n ja 6 mm:n kynäneuloissa on erittäin ohut 32G:n kanyyli. Erittäin tarkka kolmiviisteinen ja ensiluokkaisesti kiillotettu kynäneulan kärki.

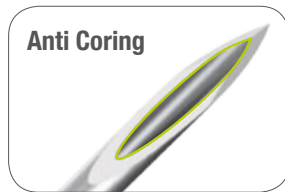

Erikoiskäsittely poistaa epätasaisuudet, estää kärjen pintojen kulumisen ja mahdollistaa sujuvan pistämisen.



Erityinen silikonikäsitelty pinta ja kiinnittyvä silikoni kanyylissä takaavat vakaat liukuominaisuudet ja siten hellävaraisen pistoksen.



Hyvän pidon takaava ulkosuojus. Tiivistyskalvo on helppo ja nopea irrottaa repäisyliuskojen ansiosta.



## Oikea kynäneulan pituuden valinta

Käyttäjätasvälliset värikoodit

mylife Penfine Classic -kynäneula on saatavana 4 eri kokona: 4 mm, 5 mm, 6 mm ja 8 mm. Kynäneulat on koodattu väreillä helpomman tunnistettavuuden vuoksi.



### Tuotteet

Tuote	Sisältö	Kanyylin halkaisija	Neulan kärki	Tuotenumero
mylife™ Penfine® Classic 4 mm	100 kpl	32G/0,23 mm, Extra Thin Wall	3 särmäinen	3300001
mylife™ Penfine® Classic 5 mm	100 kpl	31G/0,25 mm, Extra Thin Wall	3 särmäinen	700009706
mylife™ Penfine® Classic 6 mm	100 kpl	32G/0,23 mm, Extra Thin Wall	3 särmäinen	3300002
mylife™ Penfine® Classic 8 mm	100 kpl	31G/0,25 mm, Extra Thin Wall	3 särmäinen	3300003



## Universal Twist

mylife™ Penfine® Classic sopii kaikkiin yleisimpiin injektiokynäin<sup>2</sup>

mylife™ Penfine® Classic -kynäneulat on testattu standardin ISO 11608-2:2012 mukaisesti. Ne ovat täysin toimivia, kun niitä käytetään internetsivulla ja mylife™ Penfine® Classic-kynäneularasiassa mainittujen injektiokynäinien kanssa.

### Sopii seuraaviin injektiokynäin:

[www.mylife-diabetescare.fi/pc/kyna-yhteensopivuus](http://www.mylife-diabetescare.fi/pc/kyna-yhteensopivuus)

<sup>1</sup> Aronson R. et al.: Effects of Extra-Thin Wall Needle Technology on Preference, Confidence, and Other Patient Ratings, Clinical Therapeutics, 35(7):923-933, 2013.

<sup>2</sup> Katso kynäneularasia tai Internet-sivumme [www.mylife-diabetescare.fi](http://www.mylife-diabetescare.fi).

<sup>3</sup> Kanyylin letku on valmistettu lääkinällisten laitteiden valmistukseen tarkoitetusta ruostumattomasta teräksestä – ISO 9626:2016.



Diabetescare

More **freedom.**  
More **confidence.**  
With **mylife™.**



Infuusiomenetelmät



Verensokerimittarit



Hoidon hallinta



Kynäneulat

Ypsomedin mylife™ Diabetescare on laaja diabeetikoille kehitetty tuote- ja palveluohjelma. Se tarjoaa kaiken mitä tarvitaan helppoon, huomaamattomaan ja luotettavaan itsehoitoon. mylife™ Diabetescare'n ansiosta itsehoito on itsestäänselvyys.

Ypsomed Oy // Eteläinen Salmitie 1 // 02430 Masala //  
info@ypsomed.fi // www.mylife-diabetescare.fi // Asiakaspalvelu: +358 (0)9 250 1350

10192575-FI-fiv01