



Penfine®
Classic

Enjoy reliability.



swissmade+

mylife™ Penfine® Classic – vridningen som du kan lita på.

- Bara två vridningar för att få en säker koppling
- Extra tunnväggig kanyl för optimerat läkemedelsflöde¹
- Färgkodning för enkel identifiering av olika pennkanyllängder
- Speciell ytbehandling med silikon för avancerad injektionskomfort
- Passar alla ledande fabrikat av injektionspennor¹ och finns i längderna 4 mm, 5 mm, 6 mm och 8 mm

Med extra
tunnväggig kanyl



More freedom. More confidence. With mylife™.


YPSOMED
SELFCARE SOLUTIONS



Extra tunnväggig kanyl

För optimerat läkemedelsflöde

Större innerdiameter vid oförändrad ytterdiameter³

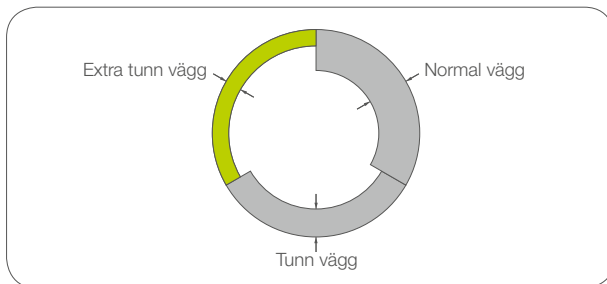


- Förbättrad medicinering på grund av högre flöde¹
- Eftersom kanylen har större innerdiameter behövs mindre kraft på injektionsknappen¹
- Passar för enkel dosering av högkoncentrerat insulin från 200 E/mL




Bara två vridningar för att få en säker koppling


Det intuitiva sättet att fästa pennkanylen²

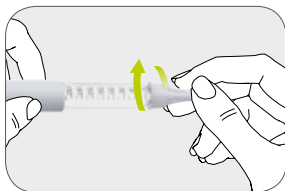

Vrid fast pennkanylen på injektionspennan.

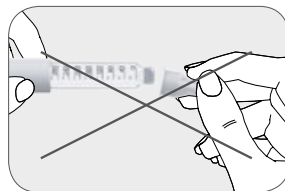

Var noga med att inte vinkla pennkanylen när du vrider fast den på injektionspennan.

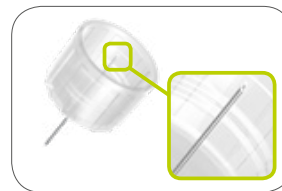

Dubbelgånga gör det snabbt och lätt att fästa kanylen.



Standardvridning som passar alla ledande fabrikat av injektionspennor.²




Egenskaper av högsta kvalitet

Upplev tillförlitlig komfort



Avancerad medicinsk kanyl med hög kvalitet: 4 mm- och 6 mm-pennkanylerna har en superfin 32G kanyl. Högprecisionskanyl med tre facetter och superpolerad spets.

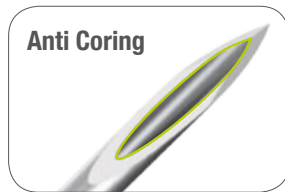

Den speciella behandlingen bort ojämnheter, gör att den slipade kanten inte blir ojämn och möjliggör en mjuk injektion.



Speciell silikonytbehandling ger konstanta glidegenskaper och mjuk penetrering.



Yttre skyddshuv som ger bra grepp. Fri flik för snabb och enkel bortdragnings av skyddsplasten.



Välja rätt kanylängd

Användarvänlig färgkodning

Pennkanylerna mylife™ Penfine® Classic finns i fyra längder: 4 mm, 5 mm, 6 mm och 8 mm. De olika pennkanylängderna med respektive inner- och ytterdiameter är färgkodade för enkel identifiering.



Produktöversikt

Artikel	Innehåll	Kanyldiameter	Kanylspets	Artikelnummer
mylife™ Penfine® Classic 4 mm	100 st.	32G/0,23 mm, Extra Thin Wall	3-fasetterad	3300001
mylife™ Penfine® Classic 5 mm	100 st.	31G/0,25 mm, Extra Thin Wall	3-fasetterad	700009706
mylife™ Penfine® Classic 6 mm	100 st.	32G/0,23 mm, Extra Thin Wall	3-fasetterad	3300002
mylife™ Penfine® Classic 8 mm	100 st.	31G/0,25 mm, Extra Thin Wall	3-fasetterad	3300003



Universal Twist

mylife™ Penfine® Classic passar alla ledande fabrikat av injektionspennor²

mylife™ Penfine® Classic pennkanyler har testats enligt ISO 11608-2:2012. De är fullt fungerande när de används med de injektionspennor som anges på webbplatsen och på förpackningen med mylife™ Penfine® Classic pennkanyler.

Passar följande injektionspennor:

www.mylife-diabetescare.se/pc/pennkompatibilitet

www.mylife-diabetescare.fi/pc/kyna-yhteensopivuuus

¹ Aronson R. et al.: Effects of Extra-Thin Wall Needle Technology on Preference, Confidence, and Other Patient Ratings, Clinical Therapeutics, 35(7):923-933, 2013.

² Se pennkanylförpackningen eller vår webbplats www.mylife-diabetescare.se

³ Kanylroret är tillverkat av rostfritt stål för medicinska produkter – ISO 9626:2016.



Diabetescare

More **freedom.**
More **confidence.**
With **mylife™.**



Infusionssystem



Blodglukosmätare



Hantering av
behandlingen



Pennkanyler

Med mylife™ Diabetescare erbjuder Ypsomed ett omfattande sortiment av produkter och tjänster för personer med diabetes. Användarna får allt som behövs för enkel, diskret och pålitlig egenvård. Med mylife™ Diabetescare blir egenvård en självklarhet.

Sverige

Ypsomed AB // Adolfsbergsvägen 31 // 168 67 Bromma //
info@ypsomed.se // www.mylife-diabetescare.se // Kundtjänst: 08 601 25 50

Finland

Ypsomed Oy // Eteläinen Salmitie 1 // 02430 Masala //
info@ypsomed.fi // www.mylife-diabetescare.fi // Kundtjänst: +358 (0)9 250 1350